



NÄYTTEENOTTO-OHJE/IHOPISTOVERINÄYTE VasSeu2-näytteille


Näyte otetaan 48-120 tunnin (2-5 vrk) sisällä syntymästä

1. Lämmitä kantapää.
2. Puhdista kantapää 80 % alkoholiin kostutetulla vanulla ja anna ihon kuivua. Näytteeseen ei saa joutua alkoholia, EDTA:a, hepariinia tai muita lisäaineita.
3. Tee ihopisto kantapään sivureunalle (kts. oheinen kuva ja näytteenottokortin kääntöpuoli) enintään 1.2 mm pitkällä steriilillä lansetilla.
4. Pyyhi ensimmäinen veripisara pois puhtaalla vanulla.
5. Käytä näytteenottokorttia seuraavasti:
joko 1.
-Verinäyte otetaan lisäaineettomalla kapillaarilla (esim. 100 µl), josta 75 µl siirretään välittömästi näytteenottokortin ympyröidyille näytealueelle. Kapillaarin annetaan tyhjentyä vapaasti. Jos näyte valuu huonosti kapillaarista, otetaan uusi kapillaari seuraavaa täplää varten.
-Kapillaarilla ei saa koskettaa näytealueen imupaperiin.
tai 2.
-Vaihtoehtoisesti koskettamalla kortin näytealueella kantapäässä olevaa veripisaraa.
-Kantapäällä ei saa koskettaa näytealueen imupaperiin.

-Yhteen ympyrään annostellaan näytettä vain kerran (75 µl).
-Imupaperin tulee kostua läpi täpläkohdasta.
-Ympyrään ei saa lisätä näytettä, vaikka ympyrä ei olisikaan täyttynyt kokonaan.
-Näytettä annostellaan vähintään kolmeen eri näyteympyrään.
-Näytteenottokortin näytekohtiin ei saa koskea sormin.
-Näytteenottokorttia kuivataan vaakatasossa huoneenlämmössä vähintään 3 tuntia.
-Näytteen kuivumista ei saa nopeuttaa lisälämmöllä.
-Näytettä ei saa jättää suoraan auringon valoon.
-Lisää lapsen näytteen tunnistetarra näytteenottokorttiin.

6. Näytekortin lähetysosoite:

VSSH/ Tykslab
Saske, os. 932
Näytteiden vastaanotto, LAB 909, ACP
PL 52
20521 Turku
Tiedustelut:
puh: 02-313 2914
s-posti: saske@tyks.fi

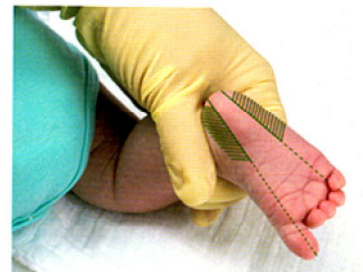

Hyvin täytetyt näytealueet.

Oikea näytteenotto kohta.